


N V NH P KH U."PHÂN PH IVÀ B O HÀNH
 CÔNG TY C PH NXU TNH P KH U THI TB YT H P PHÁT
 Vt "u ("Ujqtqqo<44"Z-" «p."R0"Rj pi"Nk"p."S0" pi" c."J«"P k"
 EP"Ok p"Pco"U "83" pi"u "5"E "Z"aN "Ik."R0"37."S033."VR0"JEO"
 EP"Ok p"Vtwpi"U ":2"Piw{ p"Vj "Okpj"Mjck."VR0" «"P pi"
 k p"vj q k"2469052808::;"*J«"P k"/"24:9052:08::;"*VR0"JEO+ "
 J qvknpg <"3;228:74
 Hcz <"2460849763;5
 Y gdukyg <"jvr<ll y y 0lvjkgvdk{vg/gw0xp
 jvr<y y 0ldgtgtxkgvpc o0eq o
 Gockn <"kphq B dgwtgtxkgvpc o0eq o

J P I F P U " F P I "
Cân i n t m t kính Beurer GS10




1. B t u s d n g

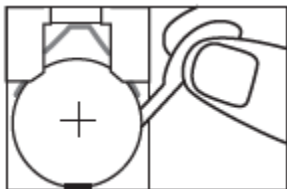

/"N r"3"rkp"ET4254"jq e"vj"q"f k"e"ej"rpk0"


/" v"e-p"vt'p"o v"d "o v"e pi."d pi"rj pi0

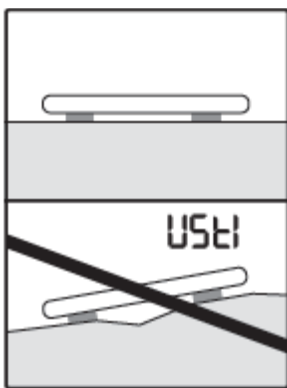

/" Pi k fÁpi"e»"vj "vjc{" k"e"e" p"x" q"mj"e"
 pjcw<"mi" "nd" "uv""*pj p"pÁv"U" "o v"ucw"e-p+"

2. Th c hi n cân


/"D e"n'p"vt'p"o v"e-p"*d pi"e "4"ej-p+0

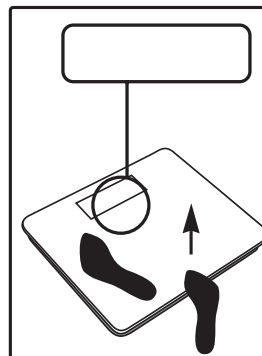

Quickstart


/"Ej e"p pi" Quickstart<"e-p"mj½pi"e p"mj k" pi"
 piw p."e-p"v " pi"d v"mj k người dùng" pi"n'p"e-p"
 x<"d v" w" q0"

- Đứng yên trong khi đang cân!
- Kết quả hiển thị nhấp nháy trên màn hình sau khoảng 2 giây.

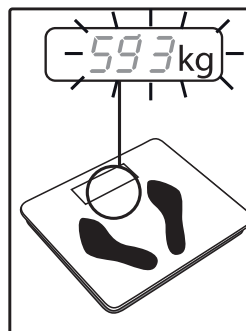


/"Đứng yên trong khi đang cân!



- Kết quả hiển thị nhấp nháy trên màn hình sau khoảng 2 giây.
- Cân tự động tắt (khoảng 10 giây).

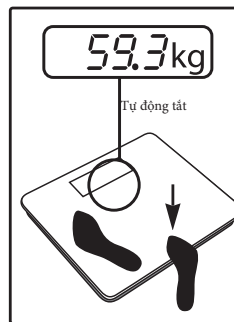

/"Đ k"e-p"v v"vt e"mj k" q"vj' o"n p"p c"*p'p"giữ cân
 tại vị trí vừa đặt+0"


Lưu ý: khi sử dụng lần đầu tiên và sau khi di chuyển cân khỏi vị trí đã đặt.

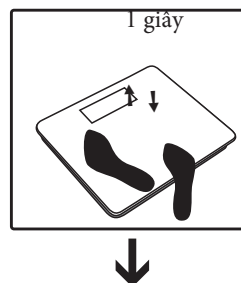

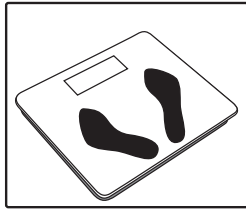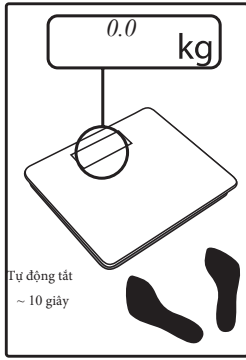


- Lấy một chân nhấn nhanh vào mặt cân cho đến khi 0.0 kg hiển thị trên màn hình.
- Chờ cân tự động tắt sau khoảng 10 giây.
- Bước lên lại và bắt đầu cân đo kết quả như mô tả trong mục 2.

3. Thông báo lỗi

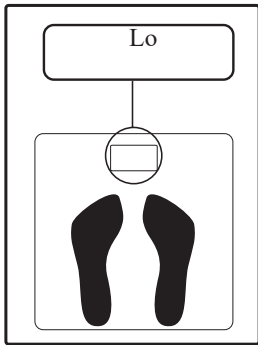

Hết pin. Thay pin mới

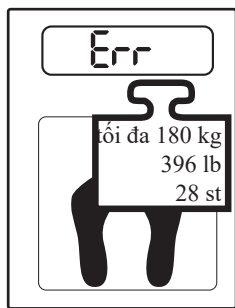

Vượt quá trọng lượng tối đa cân có thể cân

- Trọng lượng tối đa cân có thể cân: 180kg (396 lb / 28 st), Mức cn nhỏ nhất 100 g (0.2 lb / 1 lb).
 Vệ sinh: Bạn có thể vệ sinh cân bằng vải ẩm và một ít nước giặt nếu cần. Không nhúng cân vào trong nước hoặc rửa cân dưới vòi nước.

- Bảo vệ cân khỏi va đập, bụi bẩn, ẩm ướt, các chất hóa học, biến đổi nhiệt độ lớn, trường điện từ và không đặt quá gần các nguồn nhiệt
- Không bước lên mép cân bằng 1 chân để tránh cân bị lật
- Giữ túi bóng bọc cân xa tầm tay trẻ nhỏ
- Không sử dụng cân cho mục đích dịch vụ
- Để biết thêm thông tin về cách sử dụng cân, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
- Chỉ sửa chữa cân khi mang tới trung tâm bảo hành
- Nếu mắt hoặc da tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy rửa vùng bị ảnh hưởng thật sạch bằng nước và sau đó, tới trung tâm y tế để tiếp tục xử lý
- Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo gang tay bảo vệ phù hợp và vệ sinh khoang pin bằng vải khô
- Không ném pin vào lửa. Tránh nguy cơ cháy nổ
- Nếu không sử dụng cân trong thời gian dài, hãy tháo pin ra khỏi khoang pin
- Chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc tương đương, không sử dụng pin sạc
- Không tháo rời, tách hay nghiền pin
- Để bảo vệ môi trường, không thải bỏ pin đã hết cùng với rác thải sinh hoạt. Thải bỏ pin tại các hộp thu pin chuyên dụng.