



## Hướng dẫn sử dụng


### Cân sức khỏe điện tử mặt kính Beurer GS202

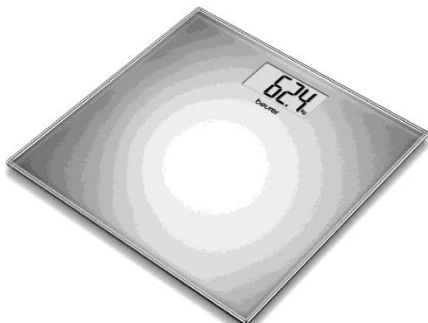


#### 1. Bắt đầu

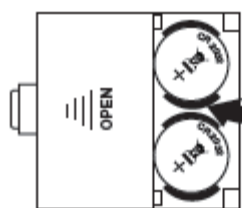

- Lắp 2 pin CR 2032 hoặc tháo dải cách pin.

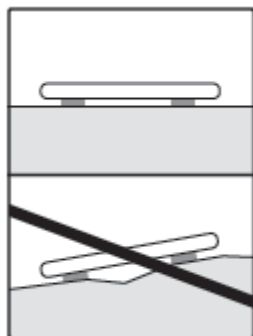

- Đặt cân trên một bề mặt cứng bằng phẳng.

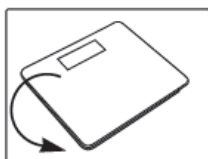


KG → LB → ST  
d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb

- Cân có thể được chuyển sang các đơn vị đo:

kg → lb → st (nhấn nút **UNIT** ở mặt sau cân)


#### 2. Cách cân

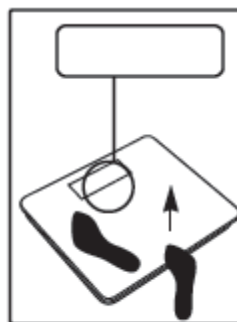


Quickstart


- Bước lên đứng trực tiếp trên mặt cân (2 chân).

- Chức năng **Quickstart**: cân không cần khởi động nguồn, cân tự động bật khi đứng lên cân và bắt đầu đo.

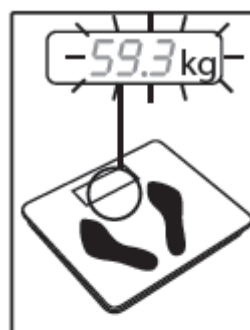

- Đứng yên trong khi đang cân!

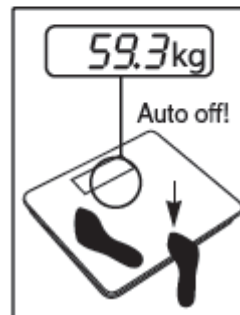

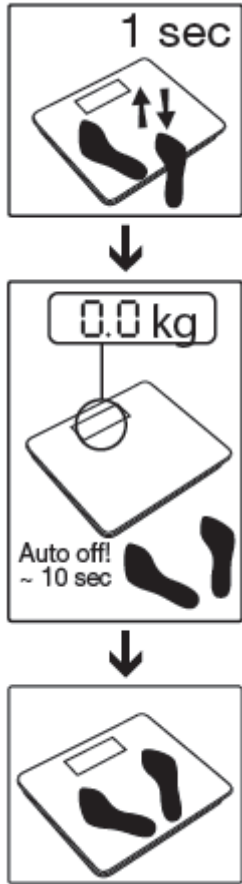


**Lưu ý:** cho lần sử dụng đầu tiên và di chuyển hoặc nhắc cân khỏi vị trí đã đặt cân.

- Bước lên đứng trực tiếp trên cân khoảng 1 giây (0.0 kg xuất hiện) rồi bước xuống.

- Chờ đợi cân tự động tắt khoảng 10 giây.

- Bước lên lại và bắt đầu cân đo kết quả như mô tả mục 2.

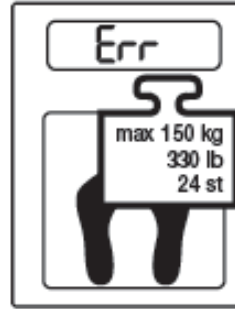


- Thông báo **Err**: quá tải - vượt quá trọng lượng tối đa: 150 kg / 330 lb / 24 st.

#### 4. Thông số

- Mức cân tối đa: 150 kg (330 lb / 24 st)

- Khoảng chia: 100 g (0.2 lb / 0,01 st)

#### 3. Thông báo lỗi

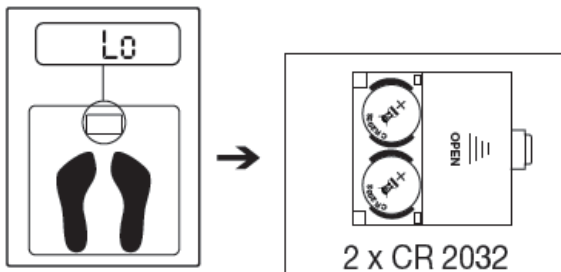

- Thông báo **Lo**: pin đã hết nguồn → thay thế tất cả các pin (2 pin CR 2032)

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT  
Trụ sở & Showroom : 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội  
CN Miền Nam : Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM  
CN Miền Trung : 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)  
Hotline : 19006852  
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn