

## Bồn ngâm chân massage Beurer FB30



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Beurer FB30 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSĐ trước khi sử dụng sản phẩm.

### **Bộ sản phẩm bao gồm:**

- Bồn massage ngâm chân
- HDSĐ tiếng Việt, Anh, Phiếu bảo hành

### **1. Các chức năng cơ bản:**

- Massage rung
- Massage sỏi bong bóng
- Giữ ấm nước
- Massage bằng ánh sáng hồng ngoại

### **2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm**

Thiết bị này chỉ để massage chân, không sử dụng khi bạn gặp những trường hợp sau:

- Nếu bạn có một sự thay đổi gây ra bởi

bệnh tật hoặc chấn thương ở khu vực của bàn chân của bạn (ví dụ như vết thương hở, mụn cóc, nhiễm nấm)

- Không sử dụng lâu hơn 40 phút (bởi nguy cơ quá nóng) và phải được làm mát ít nhất 15 phút trước khi sử dụng lại
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần bị hạn chế.
- Nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn mắc phải bệnh nghiêm trọng hoặc đang hồi phục sau một chấn thương bàn chân của bạn, nếu bạn có bệnh tiểu đường.
- Không nên sử dụng với những người bị huyết áp cao, các bệnh về giãn tĩnh mạch, viêm tĩnh mạch.
- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả trong các hướng dẫn hoạt động. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra như là kết quả của việc sử dụng không phù hợp hoặc bất cẩn.
- Thiết bị này chỉ dành cho các xoa bóp các bộ phận riêng biệt của cơ thể con người. Nó không thể thay thế điều trị y tế.

### **3. Hướng dẫn sử dụng an toàn**

Cũng giống như các thiết bị điện khác, bồn massage ngâm chân này phải được xử lý, chăm sóc và quan tâm đúng mức để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật.

Vì lý do này, thiết bị phải chỉ được hoạt động như sau:

- Với điện áp quy định trên chỉ thiết bị. Không bao giờ sử dụng thiết bị khi có giông bão.
- Trong trường hợp thiết bị bị lỗi hoặc trục trặc, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối từ nguồn điện.
- Không bao giờ giật/kéo dây dẫn điện hoặc thiết bị để ngắt kết nối phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- Giữ các dây dẫn điện tránh xa bề mặt


nóng.

- Không ngâm chân vào bồn nước trước khi cắm điện
- Hãy chắc chắn rằng phích cắm và dây dẫn điện không tiếp xúc với nước.

**Vì lý do an toàn, thiết bị phải được vận hành như sau:**

- Chỉ sử dụng thiết bị ở nơi khô thoáng (không sử dụng trong bồn tắm hoặc phòng tắm hơi), và chỉ với hai bàn tay khô.
- Không nhúng thiết bị trong nước. Không bao giờ cố gắng lấy lại thiết bị nếu nó rơi vào nước, hãy rút nguồn điện trước khi lấy nó ra.
- Không bao giờ được đứng trong khi ngâm chân.

#### 4. Mô tả thiết bị.

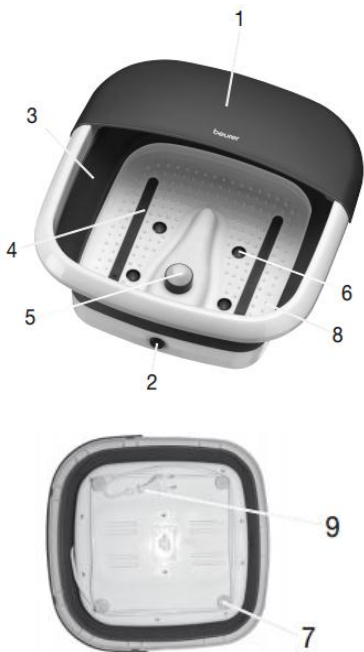

1. Tắm chân nước bắn
2. Nút chức năng
3. Mức nước cho phép
4. Dải bọt khí
5. Thiết bị chăm sóc móng chân
6. Chấm ánh sáng hồng ngoại
7. Phần massage chân
8. Rãnh thoát nước
9. Cuộn dây điện (bên dưới của thiết bị)

#### 5. Hướng dẫn sử dụng.

- Kiểm tra các thiết bị, cung cấp điện và dây dẫn



- Mở phần có thể gập lại của bồn ngâm chân bằng cách nhấn vào đế bồn ngâm bằng 1 tay và kéo phần gập của bồn lên bằng tay còn lại.
- Trước khi cắm điện, đổ mực nước không cao hơn chỉ số trên thân máy (không quá 6cm).
- Ngồi thoải mái trên ghế và đặt chân vào bồn massage một cách nhẹ nhàng. Không bao giờ đứng lên trong khi đang ngâm chân. Các chân đế cao su ở dưới giúp chống trượt cho máy.
- Bật thiết bị bằng cách nhấn nút chức năng (2)
- Các chế độ massage rung, bong bóng và massage nhiệt sẽ được bắt đầu cùng một lúc.
- Tháo/ Lắp miếng gắn massage
- Bạn có thể trải nghiệm một tác dụng mát-xa đặc biệt bằng cách di chuyển đôi chân của vào miếng gắn massage tích hợp.
- Miếng gắn massage có thể được tháo rời bằng cách nhấc lên.
- Khi lắp lại miếng gắn massage cần ấn xuống sao cho khít vào các khớp có sẵn.

#### Lưu ý:

- Không massage chân quá 40 phút.
- Massage một điểm cụ thể trên bàn chân có thể ảnh hưởng đến cơ quan tương ứng của cơ thể.
- Chúng tôi khuyên bạn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng điểm massage vùng phản xạ để đạt được hiệu quả mong muốn.

#### 6. Chăm sóc và Bảo quản

Sau khi sử dụng rửa bộ phận bằng

nước máy. Các đầu massage có thể được làm sạch với một lượng nhẹ dấm trung tính. Để làm khô thiết bị có thể chuyển sang thiết lập bong bóng mà không có nước khoảng 1 phút. Lau lượng nước có thể bị rò rỉ với một miếng vải mềm.

## **7. Thông số kỹ thuật**

Nguồn kết nối 220-240V ~ 50/60Hz 60W.