

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY TRIỆT LÔNG CHUYÊN NGHIỆP BEURER IPL10000



Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm máy triệt lông chuyên nghiệp Beurer IPL10000. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm này!

1. Giới thiệu sản phẩm

Với thiết kế nhỏ gọn, tính năng nổi trội, IPL10000 triệt lông hiệu quả, an toàn vùng chân, nách, đường bikini, vùng ngực, vùng bụng, vùng lưng, vùng mặt dưới xương gò má - ví dụ, vùng môi trên, má, hàm, cằm, cổ (chỉ thích hợp để tẩy lông mặt phụ nữ).

2. Lưu ý khi sử dụng

- Những người có khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần hạn chế có thể sử dụng thiết bị này nếu được người có trách nhiệm giám sát hoặc được hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng thiết bị.
- Đừng để trẻ em nghịch thiết bị.
- Ngừng sử dụng thiết bị ngay nếu da bạn xuất hiện ban đỏ, phỏng rộp, hay bị bỏng khi sử dụng sản phẩm.
- Không được nhìn thẳng vào ánh sáng phát ra từ thiết bị.
- Đừng bao giờ thử phát xung ánh sáng vào không khí.
- Dựa vào 'Biểu đồ màu lông và màu da' ở trang cuối của Hướng dẫn sử dụng này, chọn cường độ ánh sáng phù hợp nhất với màu da và màu lông cơ thể của bạn, và xem liệu phương pháp này có phù hợp để bạn sử dụng hay không (nếu không phù hợp, bạn sẽ thấy dấu 'x' trong biểu đồ).
- Đừng cố tháo rời hoặc sửa thiết bị để tránh tiếp xúc với linh kiện điện nguy hiểm hoặc năng lượng ánh sáng xung có thể gây thương tích và/ hoặc gây hại cho mắt.
- Thiết bị phù hợp nhất với kiểu lông sậm màu, hoặc lông có hàm lượng sắc tố melanin cao. Tuy những người có lông màu nâu nhạt hoặc nâu cũng có thể dùng sản phẩm này, nhưng thường cần nhiều thời gian tẩy lông hơn.
- Không dùng thiết bị:
 - + cho vùng da sậm màu bẩm sinh.
 - + trên hoặc cạnh vùng có cấy ghép máy trợ tim, thiết bị để trị bệnh sỏi tiểu, thiết bị bơm insulin.
 - + ở vùng mặt phía trên xương gò má, quanh mắt, lông mày, lông mi (vì vùng mắt là vùng nhạy cảm).
 - + ở vùng mặt khi mức cường độ ánh sáng lớn hơn 2.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY CP XNK TBVT HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com> Hotline: 19006852

- + ở vùng núm vú, bộ phận sinh dục (cả nam và nữ), hậu môn, mũi, tai.
- + trên vùng da có hình xăm hoặc trang điểm vĩnh viễn.
- + ở chỗ có tàn nhang lớn, vết bớt, nốt ruồi, mụn nước hoặc mụn cóc.
- + ở vùng có eczema, vẩy nến, thương tổn, vết thương hở, nhiễm trùng cấp tính. Chờ cho đến khi vùng bị ảnh hưởng đã lành mới dùng sản phẩm.
- + ở chỗ da bị rạn nứt.
- + khi đang mang thai hoặc cho con bú.
- + nếu bạn bị hoặc từng bị ung thư da; hoặc nếu bạn có khối u ác tính trên vùng da bạn định tẩy lông.
- + nếu bạn bị động kinh quang.
- + nếu bạn bị rối loạn tạo collagen (ví dụ, có sẹo lồi hoặc tế bào mô hoạt động kém).
- + nếu bạn bị mụn rộp, vẩy nến ở vùng muốn tẩy lông. Trong trường hợp này, chỉ dùng khi bạn đã hỏi ý kiến bác sĩ và được điều trị phòng ngừa.
- + nếu bạn nhạy cảm với ánh sáng, ví dụ bị rối loạn chuyển hóa porphyrin, bệnh da ánh sáng, bệnh viêm đa cơ, mày đay do nắng, bệnh luput,...
- + nếu bạn bị rối loạn chuyển hóa, ví dụ bệnh tiểu đường.
- + nếu bạn bị rối loạn đông máu.
- + nếu bạn đang uống loại thuốc khiến da nhạy cảm hơn với ánh sáng, bao gồm thuốc chống viêm không steroid (ví dụ, aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines (nhóm hợp chất kháng sinh), phenothiazines (nhóm hợp chất có liên hệ với nhau về mặt hóa học và có tác dụng dược lý khác nhau), thuốc lợi tiểu thiazid, nhóm thuốc có nguồn gốc từ sulphonamide, sulfonamide, DTIC, fluorouracil (thuốc ngăn ngừa tăng trưởng tế bào), vinblastine (thuốc phòng chống ung thư), griseofulvin (kháng sinh dùng uống để chữa các bệnh nhiễm nấm ở lông, tóc, da và móng tay), AHAs, BHAs, Retin-A, Accutane (một loại vitamin A liều cao), và/ hoặc topical retinoid (giúp trị mụn, ngăn ngừa mụn và chống viêm).
- + nếu bạn đang/ mới đây đã dùng azelaic acid để điều trị mụn, tàn nhang.
- + nếu bạn dùng steroid trong suốt 3 tháng qua.
- + nếu bạn vừa tẩy da chết hoặc dùng liệu trình làm mịn da từ 6 đến 8 tuần.
- + nếu bạn trải qua xạ trị hoặc hóa trị trong 3 tháng qua.
- Nếu bạn đang dùng thuốc theo toa, cần được theo dõi thường xuyên do bị bệnh, và/ hoặc không chắc liệu thiết bị có an toàn để bạn sử dụng không, thì hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc bác sĩ da liễu trước khi dùng thiết bị.

3. Hướng dẫn sử dụng an toàn

Về việc tắm nắng, làm da nâu nhân tạo với lotion trước khi điều trị

- Sau khi tắm nắng, đợi ít nhất 2 tuần trước khi sử dụng thiết bị.
- Trước khi điều trị, kiểm tra tình trạng da xem có dấu hiệu bị cháy nắng hay không. Nếu da bạn bị cháy nắng mà chưa lành thì đợi đến khi lành hẳn mới sử dụng thiết bị.
- Kiểm tra độ nhạy cảm của phần da bị rám nắng để xem cường độ năng lượng có hợp với da bạn.

Về việc tắm nắng, làm da nâu nhân tạo với lotion sau khi điều trị

- Sau khi dùng sản phẩm, đợi ít nhất 48 tiếng trước khi tắm nắng. Nếu da vẫn bị đỏ, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY CP XNK TBVT HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com> **Hotline:** 19006852

- Vào hai tuần đầu sau khi sử dụng sản phẩm, khi ra nắng, phải mặc kín hoặc thoa kem chống nắng (ít nhất SPF 30) lên vùng da được điều trị.


Không sử dụng thiết bị trong vòng 24 giờ trước hoặc sau khi bơi/ tắm hơi vì các chất như clo có thể làm da bị dị ứng.

Không để thiết bị, hoặc làm thiết bị rơi vào nước.

Để phòng tránh điện giật, không dùng thiết bị khi đang tắm, khi thiết bị bị ẩm hoặc ướt. Rút phích cắm ngay nếu thiết bị rơi vào nước. Không chạm vào nguồn điện hay thiết bị khi tay ướt.

4. Mô tả sản phẩm

Thiết bị cơ bản

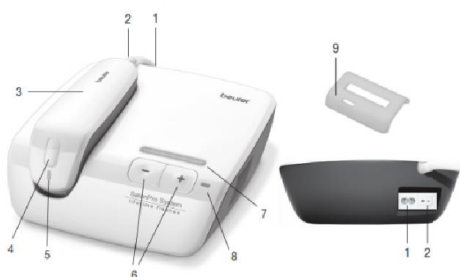

1.	Ổ cắm điện	5.	Đèn chỉ thị
2.	Công tắc	6.	Nút chọn mức cường độ
3.	Thiết bị triệt lông	7.	Đèn chỉ báo năng lượng
4.	Nút kích hoạt	8.	Đèn báo 'Hộp chứa trống'
		9.	Bộ phận chính xác

Thiết bị triệt lông



Thiết bị có nút kích hoạt. Khi kích hoạt nút này, đèn chỉ thị phát sáng.

Hộp chứa đặt bên trong thiết bị. Đèn chỉ thị ở đầu giữa thiết bị, sẽ phát sáng như sau:

Đèn chỉ thị không sáng	Chưa có xung.
Đèn chỉ thị sáng màu xanh lá cây	Chuẩn bị có xung
Đèn chỉ thị sáng màu đỏ	Xung bị chặn do màu da không hợp (vui lòng tham khảo 'Biểu đồ màu lông và màu da' ở trang cuối).
Đèn chỉ thị sáng màu da cam	Xung bị chặn do thiết bị không tiếp xúc đủ với da.
Đèn chỉ thị nhấp nháy màu đỏ/ đèn chỉ báo năng lượng nhấp nháy màu xanh lá cây	Lắp hộp chứa không đúng vị trí.

Hộp chứa

Cảm biến màu da/ Cảm biến tiếp xúc da



NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY CP XNK TBYT HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com> **Hotline:** 19006852

Trong hộp chứa có bộ cảm biến màu da. Việc dùng thiết bị tẩy lông bằng ánh sáng cho làn da quá sậm màu có thể gây hại cho da, ví dụ bỏng giộp, đổi màu da (tăng/ giảm sắc tố da). Để tránh những lỗi này, bộ cảm biến màu da giúp đánh giá màu da được điều trị. Nếu cảm biến màu da phát hiện da quá tối màu, không hợp để dùng sản phẩm, thiết bị sẽ tự động dừng phát xung, đèn chỉ thị phát sáng màu đỏ. Cảm biến màu da không chỉ giúp xác định làn da quá tối, không hợp với thiết bị, mà còn giúp bạn chọn mức cường độ phù hợp với màu da, sắc tố da của bạn.

Trong hộp chứa còn có bộ cảm biến tiếp xúc da giúp bảo vệ mắt của bạn. Bộ cảm biến này giúp ngăn xung ánh sáng phát tán ra ngoài không khí. Nếu không có xung ánh sáng, và đèn chỉ thị phát sáng màu da cam, nghĩa là khu vực ánh sáng trên hộp chứa không tiếp xúc đủ với da.

Hộp chứa còn có hệ thống bảo vệ da khỏi tia UV có hại.

5. Trước khi điều trị

Kiểm tra xem thiết bị có phù hợp với bạn

- Đọc kỹ những lưu ý sử dụng an toàn.
- Dùng 'Biểu đồ màu lông và màu da' (trang cuối) để chọn mức cường độ phù hợp nhất với bạn. 'x' trong bảng báo hiệu thiết bị không hợp với bạn.

Kiểm tra độ nhạy cảm của da

Bước này giúp xác định liệu thiết bị có hợp với da bạn không. Hơn nữa, giúp bạn chọn mức năng lượng tối ưu cho vùng điều trị. Kiểm tra độ nhạy cảm của da vùng cơ thể bạn muốn điều trị **48 tiếng** trước khi điều trị.

- Trước khi dùng, cạo lông những vùng cơ thể bạn muốn điều trị. Đảm bảo vùng da bạn muốn điều trị khô và sạch (không còn dính bột, kem, phấn trang điểm, thuốc khử mùi). Ngay trước khi dùng thiết bị, không được dùng chất dễ cháy (như cồn, acetone) để làm sạch da.
- Cài đặt thiết bị (như mục 6 'Bắt đầu điều trị').
- Đặt khu vực ánh sáng lên da. Đảm bảo khu vực ánh sáng tiếp xúc đủ với da.
- Thiết bị được cài đặt tự động ở mức năng lượng thấp nhất. Phát xung đầu tiên của mức năng lượng 1 bằng các nhấn nút kích hoạt. Bạn sẽ thấy đèn nháy sáng, nghe thấy tiếng nút, và có thể cảm thấy nóng nhẹ và/ hoặc ấm. Trong vòng 3 giây, thiết bị phát ra xung tiếp theo. Đèn chỉ thị liên tục sáng màu xanh lá cây.
- Di chuyển thiết bị triệt lông đến vùng cần điều trị tiếp theo.

Lưu ý: Chỉ tăng mức cường độ nếu mức trước không gây khó chịu cho bạn. Nếu bạn không thoải mái khi dùng cường độ mức 1, đừng tăng thêm mức.

- Mức năng lượng có tăng thêm nếu bạn nhấn nút „+”. Đèn chỉ báo năng lượng sẽ phát sáng theo mức năng lượng được chọn.

Phát xung thứ 2 của mức năng lượng 2 bằng cách nhấn nút kích hoạt.

- Chỉ lặp lại 2 thao tác trên nếu bạn vẫn cảm thấy thoải mái. Mức năng lượng tối đa là mức 6. Ngừng kiểm tra ngay nếu da bạn có dấu hiệu cực đỏ hoặc bỏng rộp.
- Đợi **48 tiếng** trước khi kiểm tra tình trạng vùng da bạn vừa kiểm tra độ nhạy cảm. Nếu vùng da đó bình thường (không có phản ứng phụ, hoặc chỉ đỏ nhẹ), bạn có thể điều trị da với mức cường độ đó. Nếu da bạn bị sưng đỏ hay phỏng rộp thậm chí ở mức năng lượng thấp, không dùng sản phẩm với vùng da đó.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY CP XNK TBYT HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com> **Hotline:** 19006852

Lưu ý: Không dùng sản phẩm nếu bạn chưa kiểm tra độ nhạy cảm của da.
Tiến hành điều trị sau khi kiểm tra độ nhạy cảm ít nhất 1 tuần.

Lập kế hoạch dùng sản phẩm

Kế hoạch tẩy lông

Chu kỳ phát triển của lông có thể kéo dài từ 18 đến 24 tháng. Trong thời gian này, cần dùng thiết bị một số lần để đạt được kết quả tẩy lông lâu dài.

- 3 hoặc 4 lần điều trị đầu nên cách nhau khoảng 2 tuần.
- Lần điều trị thứ 5 đến thứ 7 nên cách nhau khoảng 4 tuần.
- Sau đó, có thể thỉnh thoảng dùng thiết bị (nếu cần) cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.

Dùng lộ trình trên để đạt hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, bạn cũng có thể dùng lộ trình cá nhân khác mà vẫn đạt được hiệu quả mong muốn.

Lưu ý: Kết quả tẩy lông không rõ ràng nếu điều trị cùng một vùng cơ thể hơn một lần trong vòng 2 tuần.

Kế hoạch chăm sóc sau khi đạt được hiệu quả tẩy lông lâu dài

Do thay đổi nội tiết tố hoặc các thay đổi sinh lý khác, nang tóc có thể hoạt động lại. Vì vậy, bạn có thể sẽ cần dùng thiết bị một vài lần sau khi điều trị.

Làm sạch lông vùng điều trị

Trước khi điều trị, đảm bảo lông vùng điều trị được cạo sạch, vùng da sạch và khô (không còn dính bột, kem, phấn trang điểm, thuốc khử mùi).

Lưu ý: Không dùng kem làm mềm da, kem chống đau, hoặc bất kỳ loại kem nào lên da khi sử dụng máy triệt lông vùng da đó. Công ty không chịu trách nhiệm bảo hành trong trường hợp khách dùng các loại kem trên da mà gây hỏng máy.

Cài đặt mức cường độ năng lượng/ Dò tìm tự động màu da

Mức năng lượng

Mức năng lượng quyết định cường độ xung ánh sáng thiết bị phát lên vùng da điều trị (từ mức thấp nhất (-) đến mức cao nhất (+)).

Dò tìm tự động màu da

Chức năng này giúp bạn xem mức năng lượng thích hợp với da bạn.

- Để dò tìm màu da, nhấn đồng thời 2 nút chọn mức năng lượng (+ và -) trong 2 giây.
- Hệ thống dò tìm hoạt động khi đèn LEDs chỉ báo năng lượng phát sáng từ trái sang phải.
- Đặt vùng ánh sáng lên một vùng da bạn muốn kiểm tra. Đảm bảo vùng ánh sáng tiếp xúc đủ với da.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY CP XNK TBYT HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com> **Hotline:** 19006852

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn khi dùng thiết bị, dò tìm màu da ở vùng da tối nhất (ví dụ, mặt ngoài bắp chân, mặt sau của tay).

- Nhấn nút kích hoạt để dò tìm màu da. Máy sẽ do trong khoảng 1-2 giây.

Lưu ý: Thiết bị không kích hoạt xung ánh sáng khi ở chế độ dò tìm màu da.

- Mức năng lượng thích hợp cho da bạn sẽ xuất hiện trên đèn chỉ báo năng lượng.
- Nếu đèn sáng từ trái sang phải như trước, nghĩa là việc dò tìm không thành công.
- Nếu đèn chỉ báo màu da cam, chứng tỏ không có đủ tiếp xúc với da. Nếu đèn màu đỏ, da hoặc quá tối hoặc không thể dò được màu.
- Nếu vậy, nhấn lại nút kích hoạt để lặp lại các bước trên.

Lưu ý: Nếu bạn muốn bỏ dò màu da, nhấn một trong 2 nút chọn mức năng lượng (+ hoặc -) để trở về chế độ bình thường.

- Nếu bạn dò tìm màu da thành công, kiểm tra kết quả bằng cách so sánh với 'Biểu đồ màu lông và màu da'.
- Nếu kết quả khác với biểu đồ, bạn nên chọn mức năng lượng thấp hơn.
- Bạn có thể tăng, giảm mức năng lượng bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn nút +, -.

Lưu ý: Nếu da bạn không bị kích ứng hoặc chỉ kích ứng nhẹ khi dùng mức năng lượng được khuyến khích (sau lần tẩy lông đầu tiên), bạn có thể tăng thêm 1 mức năng lượng cho lần điều trị tiếp theo.

Không tăng mức năng lượng nếu bạn bị đau bất thường trong khi hoặc sau khi dùng thiết bị điều trị (Tham khảo "Bước Thích nghi với các phản ứng phụ")

Bạn có thể bị kích ứng một vài lần sau khi điều trị.

Thích nghi với các phản ứng phụ khi dùng thiết bị

Nếu bạn dùng thiết bị theo đúng hướng dẫn sử dụng, phản ứng phụ hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, mọi phương pháp điều trị thẩm mỹ đều ẩn chứa mức rủi ro nhất định. Do vậy, bạn nên hiểu và chấp nhận rủi ro có thể xảy ra khi dùng thiết bị.

Rủi ro	Khả năng rủi ro	Phản ứng phụ	Khả năng phản ứng phụ
Tác động của xung lên vùng da tương tự	Thấp	Da bị kích ứng nhẹ	Thấp
		Da bị đỏ	Thấp
		Độ nhạy cảm của da tăng	Thấp
		Da bị tổn thương, bỏng	Hiếm gặp
		Gây sẹo	Hiếm gặp
		Thay đổi sắc tố	Hiếm gặp
		Da bị tẩy đỏ, sưng phù	Hiếm gặp
		Nhiễm trùng	Bỏ qua được
		Tụ máu	Bỏ qua được

Bạn có thể nhận thấy những điều sau trong khi dùng thiết bị

Nếu bạn nhận thấy những điều sau khi dùng thiết bị, đó là việc bình thường, không phải do thiết bị bị lỗi:

- Tiếng quạt kêu vù vù
- Tiếng cracking của xung
- Cảm giác ấm, châm chích
- Da hơi đỏ.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY CP XNK TBYT HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com> **Hotline:** 19006852

6. Bắt đầu điều trị

Bắt đầu điều trị

- Lấy thiết bị ra khỏi hộp.
- Kiểm tra hộp chứa xem có được lắp đúng vào thiết bị triệt lông không.
- Cắm điện.
- Bật công tắc điện. Đèn chỉ thị và đèn chỉ báo năng lượng phát sáng. Bạn có thể nghe thấy tiếng quạt (giống tiếng máy sấy tóc).
- Thiết bị tự động được cài đặt đến mức thấp nhất, sẵn sàng phát ra xung đầu tiên.
- Có thể dùng nút chọn mức năng lượng “+” và “-” để tăng hoặc giảm mức năng lượng. Đèn chỉ báo năng lượng phát sáng màu xanh lá cây theo mức năng lượng bạn chọn.
- Đặt vùng ánh sáng ở hộp chứa vào cùng điều trị mong muốn sao cho tiếp xúc đủ với da.
- Nhấn nút kích hoạt. Bạn sẽ thấy đèn nháy sáng, nghe thấy tiếng cracking, và cảm thấy hơi rát và/ hoặc ấm. IPL10000 có chức năng “flash-glide”. Cụ thể, nếu bạn nhấn và giữ nút kích hoạt, cứ 3 giây đèn nháy sáng tự động được kích hoạt. Nói cách khác, bạn không phải lúc nào cũng nhấn nút kích hoạt.

Lưu ý: Không điều trị cùng một vùng da quá một lần trong mỗi lần tẩy lông.

Cố tránh các xung gối lên nhau.

Các xung nên được phát theo chiều mũi tên, từ đầu mũi cho đến cuối mũi. Cách này giúp bạn tránh điều trị cùng một vùng da nhiều lần.

- Đặt thiết bị triệt lông vào vùng tiếp theo cần điều trị. Tránh để máy vào vùng đã điều trị. Thiết bị sẵn sàng phát ra xung tiếp theo trong vòng 3 giây (đèn chỉ thị trên thiết bị triệt lông lại phát sáng màu xanh lá cây). Lặp lại quá trình cho đến khi tẩy xong lông mong muốn.

Sau khi điều trị bằng thiết bị IPL10000

- Tắt thiết bị bằng cách lật tắt công tắc.
- Ngắt điện.
- Sau mỗi lần tẩy lông, bạn nên lau sạch thiết bị, đặc biệt khu vực ánh sáng (vui lòng tham khảo phần ‘Vệ sinh và bảo quản’)
- Cất thiết bị trong bao bì của nhà sản xuất, tránh để thiết bị dính nước.

Điều trị vùng mặt

Vì vùng da mặt rất nhạy cảm, nên cần chăm sóc cẩn thận. Bạn nên điều trị vùng cơ thể trước để hiểu và quen cách sử dụng thiết bị trước khi điều trị vùng mặt.

Bộ phận chính xác đi kèm thiết bị có thể dùng trong việc điều trị lông vùng mặt. Bộ phận này làm khu vực ánh sáng nhỏ lại, giúp điều trị chính xác hơn. Chỉ cần lắp thiết bị vào khu vực ánh sáng. Không dùng mức năng lượng quá 3 nếu bạn lắp thêm bộ phận chính xác, và chỉ dùng bộ phận này nếu màu da bạn sáng hơn da loại 5.



- Cần kiểm tra độ nhạy cảm của da 48 tiếng trước khi điều trị. Kiểm tra ở vùng không có lông – ví dụ, dưới tai, bên cổ, để chọn mức cường độ thích hợp.
- Đánh dấu vùng cần điều trị bằng chì kẻ mắt màu trắng để tránh điều trị nhiều lần cùng một vùng hoặc vô ý điều trị vùng khác trên mặt.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY CP XNK TBVT HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com> **Hotline:** 19006852

- Dùng gương để đảm bảo đặt thiết bị lên đúng vùng cần được điều trị.
- Theo hướng dẫn sử dụng ở '**Bắt đầu điều trị**', và hướng dẫn cụ thể dưới đây:

Điều trị vùng môi trên

Đặt khu vực ánh sáng lên vùng cần điều trị. Phát xung vào vùng được đánh dấu (xem hình). Có thể mím môi để tránh xung tiếp xúc với lỗ mũi và môi vì những vùng này nhạy cảm hơn.



Điều trị vùng má và hàm

Đặt khu vực ánh sáng lên vùng cần điều trị. Phát xung ánh sáng tại từng điểm. Di chuyển từ một bên của má hoặc hàm đến bên khác.



Điều trị vùng cổ và cằm

Đặt khu vực ánh sáng lên vùng cần điều trị. Phát xung ánh sáng tại từng điểm. Di chuyển từ một bên của cổ hoặc cằm đến bên khác.



Sau khi điều trị

- Bôi lotion để làm dịu da mặt (ví dụ, lô hội).
- Không dùng sản phẩm tẩy da chết, lotion làm trắng da, hay các sản phẩm tương tự trong ít nhất 24 giờ. Vì các sản phẩm này có thể gây kích ứng cho vùng da đã được điều trị.
- Trong ít nhất 48 tiếng sau khi điều trị, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời ít nhất 15 phút. Nếu vùng da đã được điều trị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian này, phải bôi kem chống nắng có chỉ số chống nắng SPF30 hoặc cao hơn để bảo vệ da.
- Không dùng sáp hoặc nhíp để nhổ lông vùng đã được điều trị.

Lưu ý: Việc tẩy lông có thể kéo dài đến tận cuối chu kỳ phát triển lông.

7. Kết quả điều trị

- Thiết bị đem lại hiệu quả lâu dài sau vài tháng.
- Hiệu quả tới 50% chỉ sau 3-4 lần điều trị.

8. Vệ sinh và bảo quản

Vệ sinh thiết bị

- Sau mỗi lần tẩy lông, bạn nên vệ sinh thiết bị, đặc biệt khu vực ánh sáng.
- Không nhúng thiết bị hoặc bất kỳ bộ phận nào vào trong nước.
- Trước khi làm sạch, phải rút phích cắm.
- Dùng vải khô và sạch để lau thiết bị.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY CP XNK TBYT HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com> **Hotline:** 19006852

Thay hộp chứa

Hộp chứa có vòng đời đến tận 250.000 xung ánh sáng, đủ để bạn dùng trong 40 năm (một người, điều trị toàn bộ cơ thể - chân, cánh tay, nách, vùng mặt,... Nói cách khác, hộp chứa của thiết bị IPL10000 thường không cần phải thay mới.

Lưu ý: Chỉ nên thay hộp chứa nếu có vết ố to dễ nhận ra hoặc nếu mặt kính bị vỡ. Trong các trường hợp này, đem thiết bị đi bảo hành.

9. Thông số kỹ thuật

Bề mặt điều trị	7 cm ²	
Công nghệ	IPL (Ánh sáng cường độ cao phát ra theo nhịp chớp - để sử dụng trong nhà)	
Bước sóng	475 - 1200 nm	
Mức năng lượng tối đa	Tối đa 5 jun/cm ²	
Mức năng lượng	6	
Nguồn điện	110 - 240 V AC, 50 - 60 Hz	
Tốc độ	Có 1 xung cứ 3 giây: 2,3 cm ² mỗi giây	
Xung ánh sáng tối đa	250000	
Nhiệt độ	Hoạt động	10 - 40°C
	Bảo quản	-10 - 70°C
Độ ẩm	Hoạt động	30 - 70%
	Bảo quản	0 - 90% ở 55°C (không ngưng tụ)
Lớp bảo vệ	Thiết bị có 2 lớp cách nhiệt (Loại II)	

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY CP XNK TBYT HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội




Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com> **Hotline:** 19006852

Biểu đồ màu tóc và màu da

Loại da Lông	I	II	III	IV	V	VI
Đen	Mức cường độ 4-5-6	Mức cường độ 4-5-6	Mức cường độ 3-4	Mức cường độ 1-2-3	Mức cường độ 1-2-3	×
Nâu sẫm	Mức cường độ 4-5-6	Mức cường độ 4-5-6	Mức cường độ 3-4	Mức cường độ 1-2-3	Mức cường độ 1-2-3	×
Nâu	Mức cường độ 4-5-6	Mức cường độ 4-5-6	Mức cường độ 3-4	Mức cường độ 1-2-3	Mức cường độ 1-2-3	×
Vàng sẫm	Mức cường độ 4-5-6	Mức cường độ 4-5-6	Mức cường độ 3-4	Mức cường độ 1-2-3	Mức cường độ 1-2-3	×
Vàng sáng	Mức cường độ 4-5-6	Mức cường độ 4-5-6	Mức cường độ 3-4	Mức cường độ 1-2-3	Mức cường độ 1-2-3	×
Hoe đỏ	Mức cường độ 4-5-6	Mức cường độ 4-5-6	Mức cường độ 3-4	Mức cường độ 1-2-3	Mức cường độ 1-2-3	×
Xám/ trắng	×	×	×	×	×	×

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY CP XNK TBYT HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com> Hotline: 19006852