


Hướng dẫn sử dụng


Cân sức khỏe điện tử mặt kính Beurer GS170




1. Bắt đầu

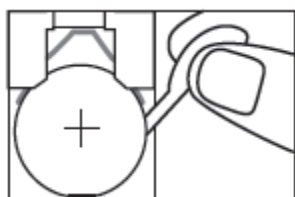

- Lắp pin hoặc tháo
dài cách pin.

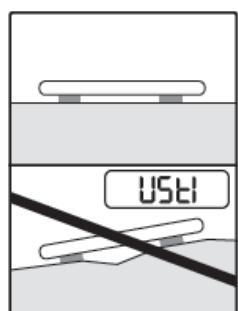


- Đặt cân trên một bề mặt
cứng bằng phẳng.

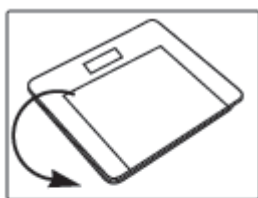


- Cân có thể được
chuyển sang các đơn
vị đo:

kg → lb → st

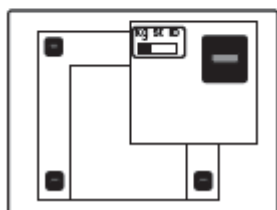


2. Cách cân

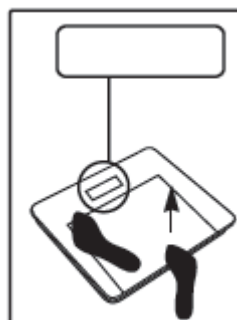


Quickstart

- Bước lên đứng trực tiếp
trên mặt cân.

- Chức năng **Quickstart**:
cân không cần khởi động
nguồn, cân tự động bật
khi đứng lên cân và bắt
đầu đo.

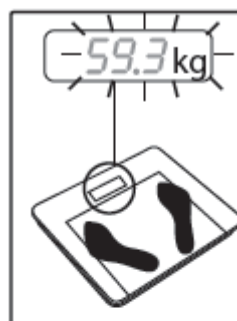

- Đứng yên trong khi
đang cân!

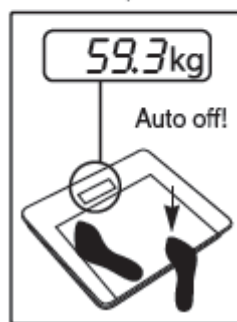



Lưu ý: cho lần sử dụng đầu tiên và di chuyển hoặc nhắc cân khỏi vị trí đã đặt cân.

- Bước lên đứng trực tiếp trên cân khoảng 1 giây (0.0 kg xuất hiện) rồi bước xuống.




- Chờ đợi cân tự động tắt khoảng 10 giây.



- Bước lên lại và bắt đầu cân đo kết quả như mô tả mục 2.



3. Thông báo lỗi

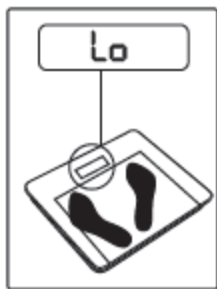

- Thông báo **Lo**: pin đã hết nguồn → thay thế pin (1 pin CR 2032)

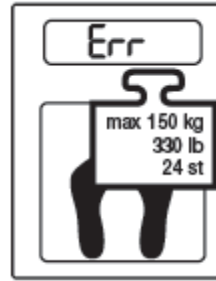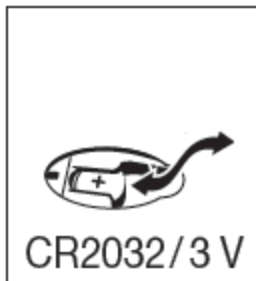

- Thông báo **Err**: quá tải - vượt quá trọng lượng tối đa: 150 kg / 330 lb / 24 st.

4. Thông số

- Mức cân tối đa: 180 kg (330 lb / 24 st)

- Khoảng chia: 100 g (0.2 lb / 0,01 st)